



## Aide-mémoire LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

### » ORDRE DES TUBES (PONCTION VEINEUSE)



Hémoculture



Tube avec citrate de sodium



Tube avec activateur de caillot,  
avec ou sans gel séparateur



Tube avec héparine (sodium/lithium)



Tube avec EDTA



Tube avec oxalate de potassium/fluorure de  
sodium (inhibiteur de la glycolyse)



Tube avec citrate de sodium (sédimentation)

### » ORDRE DES TUBES (PONCTION CAPILLAIRE)



Gaz capillaire



Micro-collecteur avec EDTA




Micro-collecteur avec héparine (sodium/lithium)



Micro-collecteur avec ou sans activateur  
de caillot, avec ou sans gel séparateur

- Tous les tubes non mentionnés dans l'ordre des tubes doivent être prélevés à la fin.
- Toujours remplir les tubes de sang avec anti-coagulant selon leur capacité de remplissage.
- Mélanger les tubes doucement immédiatement après le prélèvement, par retournements successifs complets de 5 à 10 fois.

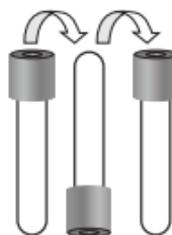

## » UN TUBE DE REJET DOIT ÊTRE PRÉLEVÉ DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

- Lorsqu'une unité de prélèvement à ailettes (papillon) est utilisée pour la ponction veineuse et que le premier tube prélevé est destiné à la coagulation;
- Lorsque le premier tube prélevé est destiné à une analyse de TCA d'un patient traité à l'héparine non fractionnée ou pour toute autre analyse spécialisée de coagulation.
- Pour tout prélèvement difficile.

## » IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Les éléments suivants doivent se retrouver sur l'échantillon :

- nom, prénom et numéro d'identification personnalisé du patient;
- date et heure du prélèvement;
- initiales de la personne ayant effectué le prélèvement.

## » QUELQUES CAUSES D'HÉMOLYSE LORS D'UNE PONCTION VEINEUSE :

- garrot laissé en place plus d'une minute;
- retournement des tubes trop brusque;
- présence d'alcool sur le site de ponction;
- ouverture et fermeture de la main de façon répétée et vigoureuse;
- prélèvement de sang via un cathéter;
- prélèvement difficile.

### **Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec**

281, avenue Laurier Est, Montréal (Québec) H2T 1G2

**info@optmq.org • www.optmq.org**

Téléphone : 514 527-9811 ou 1 800 567-7763

Télécopie : 514 527-7314